


► Der TENAX-Adapter für die **BiVOC2(V2)**


Der TENAX-Adapter schützt das Adsorbens mit 1/4-Zoll-Rohrverschraubung beim Anschließen vor der Probenahme und beim Entfernen nach der Probenahme vor versehentlicher Kontamination.



Der TENAX-Adapter hat eine Länge von 83 mm.
Die Kappe (grüner Pfeil) mit zusätzlichem Stopfen schützt das Gewinde beim Transport.

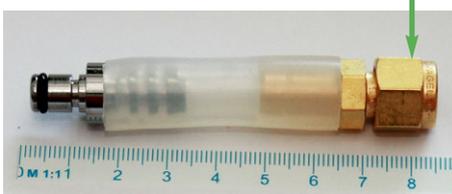

Das Foto zeigt den TENAX-Adapter (grüner Pfeil) im Einsatz.
Die Gesamtwandstärke von 5 mm der kurzen Schlauchverbindung sorgt für eine stabile Position des Adsorbens während der Probenahme.

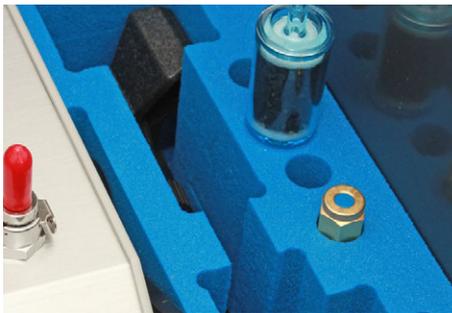

Für den Transport passt der TENAX-Adapter perfekt in eine der Bohrungen in der Schaumeinlage im Transportkoffer.

Der zusätzliche Verschluss in der Kappe verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Adapter.



Im Lieferumfang des TENAX-Adapters sind 2 kleine Dichtringe (grüne Pfeile) enthalten. Diese Dichtringe werden für die Funktion des TENAX-Adapters nicht benötigt.

